


# ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ

УНИКАЛЬНЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Лечение хирургических заболеваний грудной полости невозможно представить без дренирования плевральной полости. Установка торакальной дренажной трубки и подсоединение емкости для сбора отделяемого является основным шагом в лечении пневмоторакса, гемоторакса и синдрома плеврального выпота. Это достаточно простая манипуляция, но в то же время она требует правильного выполнения хирургической техники и качественных расходных материалов. Несмотря на то, что сегодня для хирургов это умение считается одной из самых часто выполняемых процедур, до сих пор встречается большое количество ошибок и осложнений, которые стоят жизни пациенту. Именно поэтому предъявляются высокие требования к конструкции и качеству дренажных трубок, а также способу удаления экссудата.

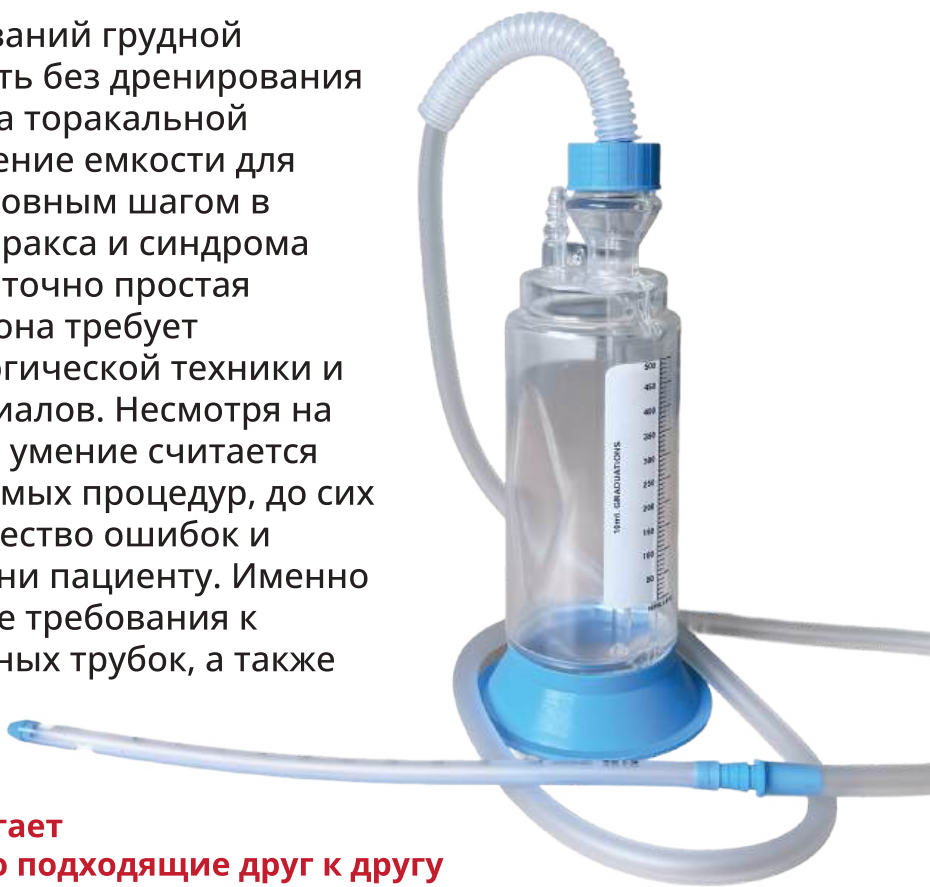

**Компания «Адвamedикс» предлагает комплексное решение - идеально подходящие друг к другу изделия для дренирования плевральной полости:**

1. торакальные дренажные трубки разных модификаций, которые подходят для установки при разных клинических ситуациях;
2. торакальные емкости разного объема для различных возрастных групп.

**Торакальные дренажные трубки подразделяются на:**

- **торакальную дренажную трубку со стилетом** - используют для быстрого создания отверстия и введения трубки в грудную полость при экстренных состояниях, таких как напряженный пневмоторакс;
- **торакальную дренажную трубку без стилета** - используют в более плановых случаях, когда не требуется экстренное вмешательство и есть возможность постепенно ввести трубку, чтобы избежать травмирования тканей или чтобы установить его для длительного дренирования, например, после операции;
- **изогнутую торакальную дренажную трубку** - позволяет поддерживать герметичность грудной стенки и предотвращать обратное поступление воздуха в полость за счет изогнутой формы, обеспечивая тем самым восстановление нормального дыхания.



Производитель: Poly Medicure Limited, Индия  
Эксклюзивный дистрибьютер на территории РФ:  
ООО «Адвamedикс»  
Тел.: +7 (495) 744-34-79, Телергам: @advamedics,  
Email: info@advamedics.ru, www.advamedics.ru



## Особенности торакальных трубок Polymed:

- мягкие, устойчивые к изломам, матовые трубки;
- не содержат фталатов;
- широкий размерный ряд 8 – 40FG;
- контрлатеральные боковые отверстия для предотвращения аспирации тканей;
- рентгеноконтрастная линия по всей длине и маркировки для контроля глубины введения.

Наиболее безопасным методом дренирования торакальной полости является дренирование в емкость с «водяным замком». Водяной замок играет роль клапана и не позволяет воздуху и выпоту попасть обратно в грудную полость.

## Торакальные емкости Polymed

(на фото уже с дренажными торакальными трубками)

представлены в трех объемах для различных возрастных групп:

500 мл



1200 мл



2000 мл



## Особенности емкости:

- прочный небьющийся корпус защищает систему от нарушения герметичности;
- четкая контрастная градуировка для измерения количества выпота;
- подвесы, позволяющие зафиксировать емкость на/под рамой кровати для устойчивого положения на полу или любой поверхности;
- устойчивая к изломам приводящая трубка большого диаметра для беспрепятственного дренирования;
- четко обозначенный уровень воды для создания водяного замка обеспечивает герметизацию и предотвращает попадание воздуха обратно в плевральную полость.

Дренажные трубки и емкости от Polymed идеально соединяются между собой, обеспечивая полную герметичность и безопасность пациента.

