

КОННЕКТОРЫ ИНФУЗИОННЫЕ

УНИКАЛЬНЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Трехходовой инфузионный коннектор (краник) – это устройство для подключения нескольких инфузионных систем к сосудистому катетеру и параллельного проведения инфузии нескольких растворов. Имеет в составе два луэр лок female разъема для подключения инфузионных систем, луэр лок male для соединения с катетером и цветную поворотную рукоятку потоков инфузии.



Коннектор инфузионный трехходовой Polyway

- рассчитан на давление до 4,5 бар (65 ф/д2)
- вращение 360°
- поворотный луэр-разъём с двумя луэр-коннекторами типа «female»
- прозрачный канал для ранней и простой визуализации
- стрелочная индикация на ручке для указания направления тока

Коннектор инфузионный трехходовой Polyway Pro (липидорезистентный)

- **совместим с липофильными препаратами**
- цвет ручки - голубой
- рассчитан на давление до 4,5 бар (65 ф/д2)
- вращение 360°
- поворотный луэр-разъём с двумя луэр-коннекторами типа «female»
- прозрачный канал для ранней и простой визуализации
- стрелочная индикация на ручке для указания направления тока



* Фиксация в положении каждые 45°

Коннектор инфузионный трехходовой Polyway Click

- **трехходовой краник с фиксацией в положении 45 градусов (тактильная фиксация при повороте на каждые 45°)**
- простая, быстрая и точная регулировка
- также доступен в липидорезистентном исполнении (Polyway Pro Click)
- рассчитан на давление до 4,5 бар (65 ф/д2)
- вращение 360°
- поворотный луэр-разъём с двумя луэр-коннекторами типа «female»
- прозрачный канал для ранней и простой визуализации
- стрелочная индикация на ручке для указания направления тока

КОННЕКТОРЫ ИНФУЗИОННЫЕ


УНИКАЛЬНЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Трехходовой инфузионный коннектор (краник) – это устройство для подключения нескольких инфузионных систем к сосудистому катетеру и параллельного проведения инфузии нескольких растворов. Имеет в составе два луэр лок female разъема для подключения инфузионных систем, луэр лок male для соединения с катетером и цветную поворотную рукоятку потоков инфузии.




Коннектор инфузионный трехходовой Polyway with Extension Tube (с удлинителем)

- прозрачная, устойчивая к перегибам ПВХ трубка обеспечивает непрерывный ток жидкости
- прозрачный корпус
- стрелочные указатели направления инфузии на рукоятке
- цвета рукоятки: белый
- допустимое давление до 4,5 бар

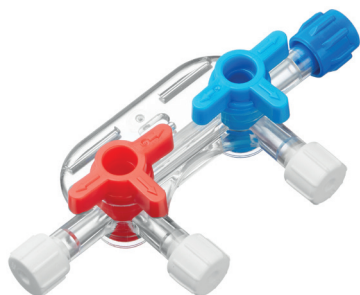

Коннектор инфузионный четырехходовой Two Stopcock Manifold (два краника)

- липидорезистентен
- конструкция луэр лок male разъема обеспечивает вращение подсоединенного коннектора на 360 градусов
- прозрачный корпус
- два поворотных выключателя потоков инфузии
- минимальный объем заполнения обеспечивает точность введения препарата
- допустимое давление до 4,5 бар

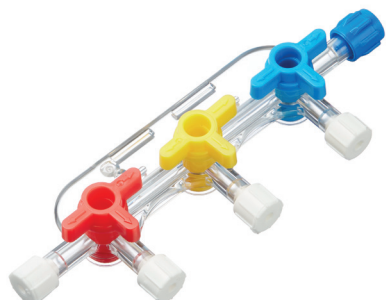

Коннектор инфузионный четырехходовой Three Stopcock Manifold (три краника)

- липидорезистентен
- конструкция луэр лок male разъема обеспечивает вращение подсоединенного коннектора на 360 градусов
- прозрачный корпус
- три поворотных выключателя потоков инфузии
- минимальный объем заполнения обеспечивает точность введения препарата
- допустимое давление до 4,5 бар